


# Lochschaubkappe mit Schutzkappe

# Holed screw cap and protective sheath

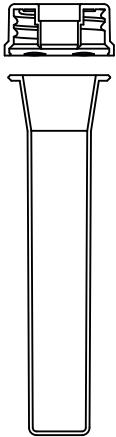

Für Flaschengewinde PP25, PP28 und PP31, passend zu allen Pipettengrößen.

**Material:** PE

For bottle threads PP25, PP28 and PP31, compatible for all pipette sizes.

**Material:** PE

Abb. 1  
Fig. 1

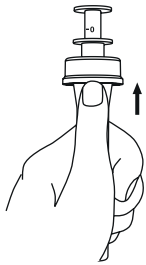


Abb. 2  
Fig. 2

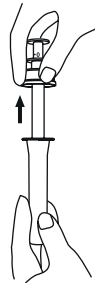


Abb. 3  
Fig. 3


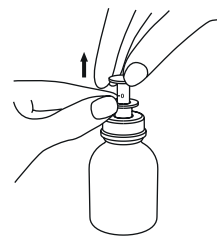


Abb. 4  
Fig. 4

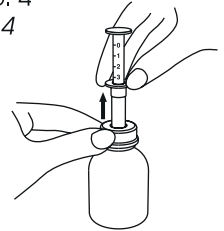

## Handhabung der Dosierpipette mit Lochschaubkappe und Schutzkappe

1. Verschluss der Flasche aufdrehen und abnehmen.
2. Schutzkappe durch Daumendruck von unten von der Schraubkappe lösen (Abb.1) und Pipette samt Schraubkappe herausziehen (Abb.2).
3. Pipette mit der Lochschaubkappe auf die Flasche aufschrauben. Die Pipette ist nun gebrauchsfertig und bleibt auf der Flasche aufgeschraubt.
4. Sowohl der transparente Dosierkörper als auch der weiße Stößel müssen sich zu Beginn der Dosierung in der untersten Position befinden. Zur Dosierung mit der einen Hand den unteren, transparenten Dosierkörper festhalten und mit der anderen Hand am oberen, weißen Stößel ziehen, bis hierauf die gewünschte Menge in ml bzw. das Körpergewicht in kg ablesbar ist (Abb.3).
5. Die Pipette am Dosierkörper (unterer, transparenter Ring) aus der Flasche herausziehen (Abb.4).
6. Die entnommene Menge durch Drücken auf den Stößel (weißer Ring) aus der Dosierpipette auf einen Löffel geben oder in ein Glas mit etwas Flüssigkeit entleeren und verabreichen. Das Medikament kann auch direkt aus der Pipette in den Mund gegeben werden.
7. Leere Dosierpipette bis zur nächsten Anwendung in die Lochschaubkappe auf der Flasche zurückschieben.

## Handling procedure for dosing pipette with holed screw cap and protective sheath

1. Open the bottle and remove the sealing cap.
2. Using thumb pressure, detach the protective sheath from screw cap (Fig.1) and then pull out the pipette with screw cap (Fig.2).
3. Screw the holed screw cap with mounted pipette onto the bottle. The pipette is now ready for use and remains screwed on the bottle.
4. At the start of the measuring procedure the transparent dosing body as well as the white plunger must be in the bottommost position. To measure the dosing quantity use one hand to hold the bottom transparent dosing body and the other hand to pull on the top white plunger until you can read the desired quantity in ml or the body weight in kg (Fig.3).
5. Pull the pipette by the dosing body (bottom transparent ring) out of the bottle (Fig.4).
6. Put the quantity removed by the dosing pipette onto a spoon by pressing down on the plunger (white ring) or empty into a glass with some liquid and give it to the patient. The drug can also be given directly from the pipette into the patient's mouth.
7. Push the empty dosing pipette into the holed screw cap of the bottle until it is used next time.