

# Kurzform-Pipette

# Shortform-Pipette

Die Kurzform-Pipette mit elm-tip und einteiligem PE-Kolben - die Ergänzung zu dem großen Sortiment der 3-teiligen PE-Pipetten und mögliche Alternative, u. a. wenn Dosierer mit großer Genauigkeit für relativ große Dosiervolumen kleinen Umverpackungen beigelegt werden müssen.

Durch den Einsatz von elm-tip Pipetten statt der gängigen Luer-tip Pipetten erreichen wir eine Inkompatibilität der Pipetten mit Luer-Anschlüssen und Nadeln. Dadurch wird Missbrauch verhindert, z.B. durch intravenöse Nutzung der Pipetten, der zu schwerwiegenden Folgen für den Patienten führen könnte.

Passend zu dieser Pipette liefern wir Adapter für PP28 und DIN/GL18-Flaschenmündungen, sowohl für Glas-, PE- und PET-Flaschen. Diese Adapter ermöglichen eine restlose Flaschenentleerung und verhindern eine Kontamination des Flascheninhaltes, da die Pipettenoberfläche nicht mit dem Medium in Kontakt kommt.

Die hohe Transparenz des PP-Pipettenkörpers und die hervorragende Gleitfähigkeit des PE-Kolbens machen diese Pipette zu einem ebenso gefälligen wie praktischen Dosiermittel.

Die Bedruckung des Pipettenkörpers erfolgt nach Ihren Vorgaben.

Auf Wunsch kann die Pipette mit Adapter montiert und einzeln verpackt geliefert werden.

The Shortform-Pipette with elm-tip and single-piece PE-Piston - it is the addition to the large assortment of tripartite PE-pipettes, providing an alternative in cases where a precise pipette for relatively large dosing volumes has to be enclosed in a small outer package.

By the use of elm-tip pipettes instead of the popular luer-tip pipettes we reach an incompatibility of the pipettes with luer-connectors and needles. Thereby misuse will be avoided, e.g. an intravenous use of the pipette, which can lead to fatal consequences for the patient.

For this pipette adaptors are available for glass-, PE- and PET-bottles with bottleneck PP28 and DIN/GL 18. The adaptors allow a complete emptying of the bottles and they prevent the medicine from contamination as the pipettes surface won't get into contact with the medium.

Printing of the dosing body is carried out according to your wishes.

If requested the pipette can be delivered mounted with adaptor and/or single packed as well.

Art.-No. 703100  
3 ml Pipette  
3 ml pipette

Art. No. 712100  
12 ml Pipette  
12 ml pipette

Art.-No. 706100  
6 ml pipette  
6 ml pipette

Art. No. 725100  
25 ml Pipette  
25 ml pipette

**Material:** Körper: PP, Kolben: PE


Die Bedruckung des Pipettenkörpers erfolgt nach Ihren Vorgaben.

Auf Wunsch kann die Pipette mit Adapter montiert und einzeln verpackt geliefert werden.

**Material:** body: PP, piston: PE

Printing of the dosing body is carried out according to your wishes.

If requested the pipette can be delivered mounted with adaptor and/or single packed as well.

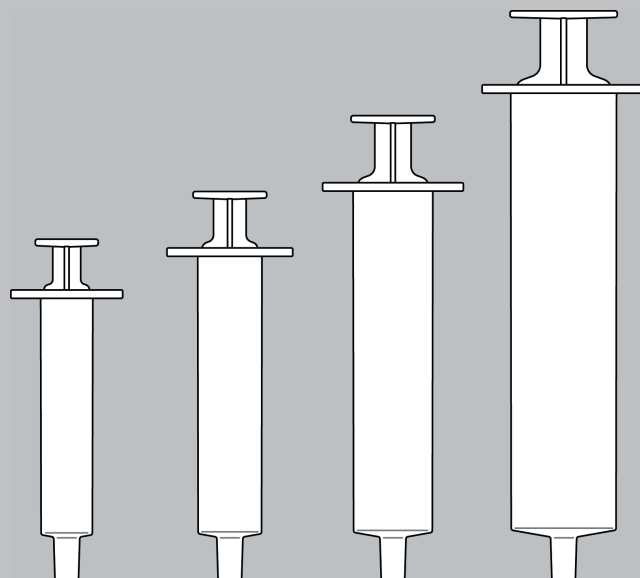

CE  
0124

Art.-No.  
Dosiervol.  
Dosing vol.

703100  
3 ml

706100  
6 ml

712100  
12 ml

725100  
25 ml